


MJF SERIES JAR TESTER / FLOCCULATOR

MİPRO JAR TEST (FLOKÜLATÖR) CİHAZI

Altı karıştırma pozisyonu ile aynı anda farklı numunelerle çalışabilme imkanı. Dijital ekranı ile hız ve zamanlayıcı değerlerinin ayarlanıp izlenebilmesi. 30 ila 300 rpm arasında dijital olarak seçilebilen karıştırma hızı. Mikroişlemci kontrollü zamanlayıcısı ile cihaz yanında beklemeden çalışılabilir ve süre sonunda otomatik durur. Tüm pozisyonlar için aynı hız ve zaman ayarı ile karşılaştırılabilir sonuçlar sunar. Güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar ile kullanıcı dostu kullanım. Elektronik olarak kontrol edilen DC dişli motoru ile hassas ve doğru hız. Hız ve zaman için grafik likit kristal ekran. Numuneyi görmeyi kolaylaştırmak için aydınlatılmış arka yüzey. Kullanıcıya kolay kullanım sağlayan, aletsiz olarak yüksekliği ayarlanabilen karıştırma çubukları. Kimyasal ve mekanik korozyona karşı güçlü direnç sağlayan tasarım.

- 30 ile 300 rpm arasında farklı hızlarda çalışma imkanı
- Hız ayar hassasiyeti 1 rpm
- Her karıştırma çubuğu için aynı hız
- Paslanmaz çelik karıştırma çubukları;
ayarlandığı pozisyonda duran sapı ile yükseklik ayarı yapılabilir.
- Programlanabilir dijital kontrol ünitesi, Grafik Likit Kristal Gösterge (GLCD)
- Tek kontrol butonu ile kolay kullanım, kilitleme özelliği
- Hız ve zaman (1 dk-99,9 saat/sürekli) için GLCD gösterge
- 6'lı flokülasyon platformu
- Gövde Malzemesi Epoksi kaplı metal
- Arka yüzey Sökülebilir şekilde ışıklandırılmış
- 220 V, 50 Hz şehir elektriği ile çalışma
- DC motor
- Ağırlık $\approx$ 25 kg
- Boyutlar (GxYxD) 1000*450*300 mm
- Güç 10 - 20 W

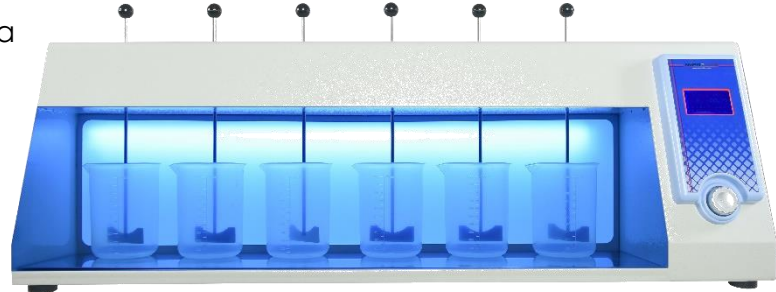

TEL: + 90 (312) 324 49 83 - 84
BELGE GEÇER: + 90 (312) 324 59 74
KURUMSAL CEP: + 90 (542) 395 75 56
KURUMSAL CEP: + 90 (542) 395 75 56

www.proteklabtr.com
satis@proteklabtr.com
bilgi@proteklabtr.com
Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1362 Cade No: 41
İVEDİK ORGANİZE SANAYİ
Yenimahalle - ANKARA




MJF SERIES JAR TESTER / FLOCCULATOR

MIPRO JAR TEST (FLOCCULATOR)

Possibility to work with different samples at the same time with 6 mixing positions. Adjustment and monitoring of speed and timer values with its digital display. Digitally selectable mixing speed from 30 to 300 rpm. With its microprocessor-controlled timer, the device can be operated without waiting and it will stop automatically at the end of the time. It offers comparable results with the same speed and time setting for all positions. User-friendly operation with reliable and repeatable results. Precise and accurate speed with electronically controlled DC gear motor. Graphic liquid crystal display for speed and time. Illuminated back surface to facilitate sample viewing. Height-adjustable stir bars without tools, providing easy use to the user. Design providing strong resistance to chemical and mechanical corrosion.

- Possibility to work at different speeds between 30 and 300 rpm
- Speed adjustment precision 1 rpm
- Same speed for each stir bar
- Stainless steel stir sticks; height adjustment can be made with the handle that stands in the position where it is adjusted.
- Programmable digital control unit, Graphic Liquid Crystal Display (GLCD)
- Easy to use with a single control button, locking feature
- GLCD display for speed and time (1 min-99.9 hours/continuous)
- 6 flocculation platforms
- Body Material Epoxy coated metal
- Back surface is detachably illuminated
- Working with 220 V, 50 Hz city electricity
- DC motor
- Weight $\approx$ 25 kg
- Dimensions (W*H*D) 1000*450*300 mm
- Power 10 - 20 W

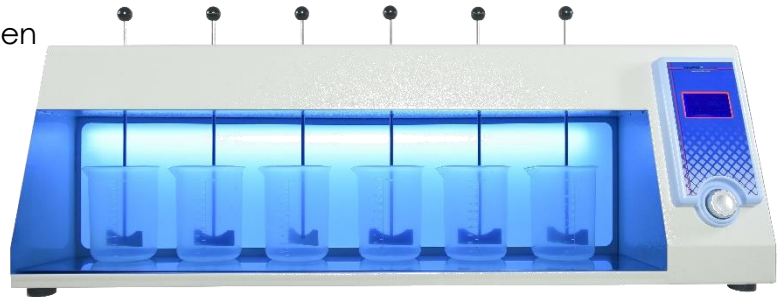

TEL: + 90 (312) 324 49 83 - 84
BELGE GEÇER: + 90 (312) 324 59 74
KURUMSAL CEP: + 90 (542) 395 75 56
KURUMSAL CEP: + 90 (245) 382 12 20

www.proteklabtr.com
satis@proteklabtr.com
bilgi@proteklabtr.com

Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 1362 Cade No: 41
İVEDİK ORGANİZE SANAYİ
Yenimahalle - ANKARA

